



O P T I C S

www.ovio-optics.com

Porte-composants


**202241/202242/202435/
202437/202439/202440/202441/
202442/202445/ 204705/204719**

Porte-composant définitif Ø 40-42

Système étudié pour fournir une solution pour le montage de longue durée de vos composants sur supports. Le composant est bloqué par un épaulement intérieur et une contre bague à visser

- Bague en aluminium anodisé
- Compatible avec les diamètres 40 et 42 mm
- A=37 mm ; B=43 mm ; C=100 mm ; D=4mm ; E= 10 mm
- Fourni avec tige de diamètre 10 mm et outil de vissage/dévisage
- Convient jusqu'à des épaisseurs de composants de 7 mm

202241

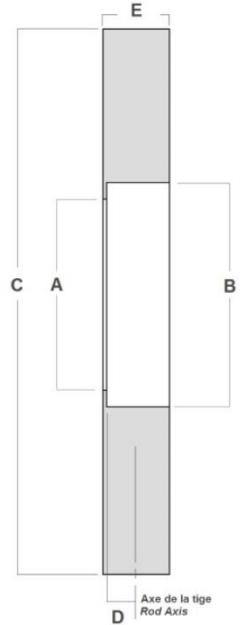

Porte-composant rapide Ø 40-42

Dispositif à serrage oblique, sans élément amovible, garantissant blocage du composant et changement

- Support en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Compatible les diamètres 40 et 42 mm
- A=37 mm ; B=43 mm ; C=100 mm ; D=5mm ; E= 10 mm
- Epaisseur maximale du composant : 8 mm

202435



Porte-composant Ø 80

Système étudié pour fournir une solution de longue pour le montage de vos composants Ø 80. Le composant est bloqué par un épaulement intérieur et une contre bague à visser.

- Bague en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Compatible avec le diamètre 80 mm
- A=72 mm ; B=82 mm ; C=100 mm ; D=4 mm ; E= 10 mm
- Epaisseur maximale du composant : 7 mm
- Porte-composant spécial lentilles divergentes (plus épaisses) : réf. **204719**

202437/204719



Porte-composant simple Ø 40-42

Porte-composant métallique. Le composant est bloqué par un épaulement intérieur. La mise en place s'effectue en enlevant le ressort de blocage

- Bague en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Destiné aux composants avec le diamètre 40 (**202439**) ou 42 mm (**202440**)
- A=38 mm ; B=40.5 mm (**202439**) ou 42.5 mm (**202440**) ; C=60 mm
- D=2.5 mm ; E= 10 mm
- Epaisseur maximale du composant : 6 mm

202439/202440



Porte-composant quadruple Ø 40-42

202445

Porte-composant multiple à barillet doté de 4 emplacements au diamètre 40/42mm. Le passage d'un composant à l'autre est effectué par rotation du disque principal. Les 3 autres composants sont isolés par un cache. La mise en place des composants est effectuée par une bague de contre serrage. Ce système permet de regrouper sur un même support des composants aux fonctions proches (filtres colorés, filtres interférentiels, fentes et trous de diffraction, lentilles de focales différentes...)

- Support en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Compatible avec les diamètres 40 et 42 mm
- A=38 mm ; B=44 mm ; C=130 mm ; D=4 mm ; E= 10 mm
- Epaisseur maximale du composant : 7 mm



Porte-composant à ressorts Ø 40-42 **202441/202442/204705**

Porte-composant de conception simple, utilisable dans les deux sens selon le diamètre souhaité. Chaque face dispose de 4 pions de maintien (une face au diamètre 42 mm, l'autre en diamètre 40 mm) et d'un ressort de blocage. La mise en place est rapide.

- Support en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Destinés aux diamètres 40 ou 42 mm
- Diamètre extérieur : 100 mm. Diamètre utile : 38 mm
- Epaisseur maximale du composant : 6 mm
- Forme des picots :
 - . Courts : réf **202441**
 - . Longs : (lisses réf **204705** / rainurés réf **202442**)



Porte diapositive à lames ressort

202242

Système sur plaque métallique. La mise en place et le maintien en position se fait par deux lames incurvées pourvues de ressorts.

- Support en aluminium anodisé monté sur tige de diamètre 10 mm
- Diamètre utile : 38 mm
- Diamètre extérieur : 100 mm
- Epaisseur maximale du composant : 4 mm



Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.